




Dette er en praktisk håndholdt massagepistol, der er med til at lindre kroppens ømhed. Massagepistolen hjælper med at genoprette kropsvævet, forbedrer muskel restitution og kan justeres i 6 forskellige hastigheder. Der er inkluderet 4 udskiftelige massagehoveder, der henvender sig til enhver muskelgruppe for en behagelig og effektiv massageoplevelse.

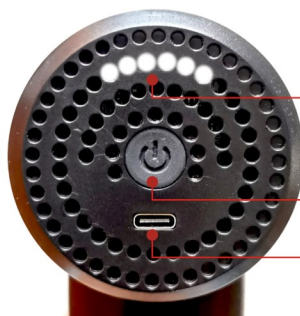

Hastighedsindikator

Power knap

Opladningsport

Hastighed frekvens

- 1. hastighed - 2200rpm
- 2. hastighed - 2400rpm
- 3. hastighed - 2600rpm
- 4. hastighed - 2800rpm
- 5. hastighed - 3000rpm
- 6. hastighed - 3200rpm

- Lindre kroppens ømme muskler gennem dyb muskelmassage
- Genopretter kropsvævet, forbedrer muskel restitution og kan justeres i 6 forskellige hastigheder.



Kugleformet hoved



Gaffel hoved



Fladt hoved



Bullet hoved

Kugleformet: Arm, talje, hofte, lår, læg og andre store muskelgrupper

Gaffel hoved: Afslapper og former forskellige muskeldele

Fladt hoved: Nakke, rygsøjle og akillesene

Bullet hoved: Dybt væv som led, håndflader og plantar

- Vælg det massagehoved du vil bruge, og sæt det i det runde hul foran massagepistolen
- Tryk og hold Power-knappen nede for at tænde massagepistolen, der vil starte ved den laveste hastighed.
- Tryk på Power-knappen for at øge massagepistolens hastighed
- Hvert tryk vil øge frekvensen af din massage op til niveau 6 max.
- Tryk på Power-knappen igen for at sætte massagepistolen på standby tilstand

Pakken indeholder:

- Massagepistol
- Ladekabel
- 4 massagehoveder
- Brugervejledning

Opladningsinstruktioner

- Batteriet skal være fuldt opladet før brug.
- For at oplade batteriet skal du sætte USB C-kablet i opladningsporten og den anden ende til en USB-strømkilde
- Når enheden oplades, blinker batteriindikatoren
- Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren
- Den gennemsnitlige køretid for massageapparatet er 45-180 minutter afhængig af hastighed og trykniveauer.

Sådan vedligeholdes massagepistolen

- For at holde massagepistolen skal du tørre dens overflade af med et let fugtigt håndklæde og tørre den med en blød klud.
- Hold enheden væk fra væsker og varme.

Specifikationer

- Batteritype: Lithium-ion-batteri
- Batterikapacitet: 2000 mAh
- Ubelastet hastighed: 2200-3200 rpm/min
- Slaglængde: 6,5-8,0 mm
- Opladningstid: 180 min
- Arbejdstid: 180 min
- Indgang: 5V/2A

Sikkerhedsinstruktioner

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at reducere risikoen for elektrisk stød, brand og personskade:

1. Denne enhed anbefales kun til brug af voksne.
2. Brug ikke massagepistolen direkte på overfladen af din hud. For at undgå skader dækkes det masserede område af rent tøj eller et tørt håndklæde.
3. Tryk og flyt forsigtigt massagepistolen; massér ikke den samme del af kroppen i mere end 60 sekunder.
4. Brug kun høj hastighed på blødt kropsvæv. Brug ikke høj hastighed og pres på hoved, knogler og led.
5. Vælg altid det rigtige massagehoved til den respektive kropsdel.
6. Hyppig brug af højt tryk kan forårsage slid. Hvis du oplever smerter eller ubehag, stop straks med at bruge massagepistolen.
7. Massagepistolen må ikke nedsænkes i vand.
8. Undlad at åbne, adskille eller ændre massagepistolen.
9. Lad være med at oplade eller efterlade massagepistolen TÆNDT uden opsyn

Ansvarsfraskrivelse

Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger massagepistolen. Brugen af dette udstyr er betinget af, at dets instruktioner nøje følges. Dette er ikke ansvarlig for skader eller tab forårsaget af ukorrekt brug af denne enhed. Brug ikke dette massagepistolen uden din læges godkendelse, hvis du er: gravid, diabetiker, har en pacemaker, er ved at komme dig efter en operation, lider af migræne, neuropati, diskusfremspring eller spinalbetændelse. Hvis du føler smerte eller ubehag, mens du bruger massagepistolen, skal du stoppe med at bruge det med det samme og kontakte din læge eller fysioterapeut.

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning