



EM06

BRUGER MANUAL



Produktnavn: Massagepistol

Modelnavn: EM06

Arbejdsspænding: 12V

Udgangseffekt: 12W

1.Mainframe

2.Batteriets strømindikator

3.Batteriknap


4.Opladningsport

5.Effektindikator: Når det digitale display på den højre side af LCD-skærmen viser 99, betyder det, at strømmen er fuld. Nummeret skifter gradvist til 80, 60, 40, hvilket betyder, at strømmen går ned. Når displaynummeret er 20, er batteriet ved at løbe tør og har brug for at blive opladet.

6.Gearindikator: Nummeret på venstre side af skærmen repræsenterer produktets løbeværk. For 01 gear er pulsfrekvensen 1200rpm. Hvis der tilføjes en gear, forøges frekvensen med 400rpm. Den højeste hastighed er 06 og tophastighed er 3200rpm.

7.Forøge eller formindske knappen: $\oplus$, $\ominus$ knappen ved bunden af skærmen er gearets forøgelses- og formindselsknapp. Når du har trykket på $\oplus$, forøges gearet med en. Når du trykker på $\ominus$, formindskes gearet med en. Hvis du fortsætter med at trykke på $\oplus$ eller $\ominus$ knappen for fem sekunder, vil massageren slukke. Tryk på $\oplus$ knappen igen for at starte massageren igen.

8.Batteri: Spænding 12V
01-06 gear

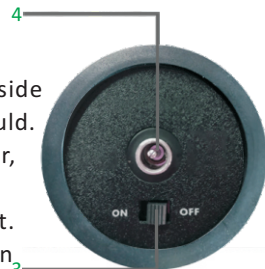

Instruktioner ved brug:

1. Når du sætter batteriknappen på "TÆND", lyser batteriets strømindikator op. Skærmylset tændes. De to numre på højre side af skærmen repræsenterer batteriets strøm. 99/80/60/40/20 indikerer strømmen fra fuld til lav.
2. I forhold til behovet for de forskellige dele af massageren vælges det rette massagehoved at sætte ind i det runde hul foran massageren.
3. Tænd på  knappen ved bunden af skærmen og massageren tændes. Nummeret på venstre top af skærmen repræsenterer gearpositionen. Hvert tryk på  knappen forøger gearpositionen med et gear. 01 hastighed er 1200rpm. Hvert ekstra gear forøger hastigheden med 400rpm. Den højeste hastighed er 06 gear og hastigheden er 3200rpm. Når du trykker på  knappen, formindskes produktet med et gear. Ved enhver gearposition (01-06) vil et langt tryk på  eller  knappen i fem sekunder slukke massageren.
4. Når massagen er færdig, tryk batteriknappen til "OFF"-positionen og skærmen vil slukke.
5. I forbindelse med at beskytte produktet vil fascia massageren automatisk slukke, hvis den kører kontinuerligt i 10 minutter, eller hvis pressekraften er for høj. Blot tænd den igen, hvis der er fortsat er behov for brug.

Batteriinstruktioner ved brug:

Når batteriet er opbrugt, har det brug for 2-3 timer for at være fuld opladt. Batteriets arbejdstid afhænger af gearpositionen. Batteriets indikator for at være tændt lyser op, når batteriet oplades. Den vil gå fra rød til grøn. For din sikkerhed bør der aldrig tændes for produktet, når batteriet er i gang med at blive opladt.

Sikkerhedsinstruktioner:

For at formindske risikoen for elektrochok, brand og personlig skade skal dette produkt blive brugt i overensstemmelse med følgende instruktioner.

1. Kun tilladt for voksne.
2. For at undgå skader på huden må dette produkt ikke massere direkte på hudens overflade. Det masserede område bør være beklædt med tørt og rent tøj eller et rent og tørt håndklæde. Du skal presse og bevæge forsigtigt. Massering af samme del af kroppen må ikke overstige 60s.
3. Kun brug høj hastighed og højt tryk på bløde dele af kroppen uden at forårsage smerte og ubehag. Brug ikke høj hastighed og højt tryk på hovedet eller knoglede dele af kroppen.
4. I forbindelse med massagens behov på forskellige dele af kroppen vælg venligst det korrekte massagehoved.
5. Hyppig brug af høj hastighed og højt tryk for at lægge tryk på samme kropsdel vil forårsage slid. Vær venlig at stoppe, hvis du føler smerte eller ubehag.
6. Vær venlig at holde fingre, hår og andre dele af kroppen væk fra den teleskopiske stang og varmespredningshullet på motoren for at forhindre klemmeskader.
7. Placer ingenting i motorens kølelegeme.
8. Udstyret må ikke diffunderes i vandet. Lad aldrig vandet fra motorens kølerum komme ind i udstyret.
9. Produktet må ikke kasseres eller misbruges.
10. Brug kun den originale oplader til opladning.
11. Kontrollér omhyggeligt dit produkt og batteri inden hvert brug.
12. Der må ikke foretages personlige modificeringer på udstyret.
13. Lad ikke produktet køre eller være til opladning i ubemandet tilstand.

Vedligeholdelse:

1. Tør overfladen af produktet med et lettere fugtigt viskestykke og tør af med en blød klud.
2. Når du opbevarer eller er bortrejst i lang tid, skal produktet adskilles fra batteriet og placeres i produktets oprindelige kasse.



Advarsel:

1. Lad ikke blive i vandet. Hold produktet væk fra væsker og varmekilder for at sikre, at motorens kølerum er fri for støv og snavs.
2. Skruerne må ikke fjernes selv.
3. Sluk produktet efter en times brug, og brug den først igen efter en halv times hvile.
4. Fjern opladeren fra batteriet efter opladning. Brug ikke produktet, imens det oplades.
5. Brug af dette produkt på skadet dele af kroppen er forbudt uden konsultation af læge.

Ansvarsfrigivelse:

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Brug dette produkt korrekt i overensstemmelse med instruktionerne. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for skader eller tab for kunden forårsaget af ukorrekt brug af dette produkt som beskrevet. Brug ikke dette produkt uden godkendelse fra din læge, hvis følgende: graviditet, diabetes og komplikationer, neuropati eller nethindeskader, pacemakerbrug, haft operation for nyligt, migræne, diskusprolaps eller rygmarsvinflammation, hvis intrauterinhed er blevet indsat, eller har sundhedsmæssige problemer. Du skal først konsultere din læge og bruge den med din læges tilladelse.

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Brug dette produkt korrekt i overensstemmelse med instruktionerne. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for skader eller tab for kunden forårsaget af ukorrekt brug af dette produkt som beskrevet. Brug ikke dette produkt uden godkendelse fra din læge, hvis følgende: graviditet, diabetes og komplikationer, neuropati eller nethindeskader, pacemakerbrug, haft operation for nyligt, migræne, diskusprolaps eller rygmarsvinflammation, hvis intrauterinenhed er blevet indsat, eller har sundhedsmæssige problemer. Du skal først konsultere din læge og bruge den med din læges tilladelse.

Garantivejledning:

Vi udbyder garanti for batteri, motor og controller på 6 måneder. Andre sliddeles garanti er på 3 måneder.

Undtages, hvis:

1. Skade på dette produkt forårsaget af forkert brug eller transport af person.
2. Uautoriseret fjernelse og reparation af dette produkt.
3. Brugermanualen ikke blev fulgt.
4. Overbelastet brug af dette produkts designparameter.
5. Skader på grund af kundens usædvanligt dårlige opbevarings- eller vedligeholdelsesomgivelser.
6. Manglende dokumentation for købsdato.

